


Manual de utilizare EL203A

Dorim să vă mulțumim pentru încrederea acordată cântarului EL203A, pentru bebeluși și copii cu o greutate de până la 20 kg. Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul. Păstrați acest manual la îndemână pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.



1. Buton unitate de măsură
2. Buton "HOLD"
3. Buton "TARA"
4. Buton ON/OFF

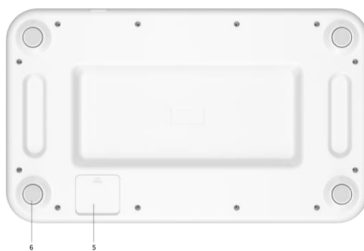

5. Capac baterie
6. Senzor

Specificații:

- Putere: 4,5V - 3 baterii AAA
- 4 butoane
- Display LCD, mărime 54 x 21 mm
- Unități de măsură: kg/oz/lb/g
- Capacitate: 20 gr. - 20 kg
- Gradare: 10 gr.
- Oprire automată și pornire automată de la zero
- Indicator nivel scăzut baterie. Indicator greutate depășită. Funcție HOLD
- 4 senzori și piciorușe antiderapante

Utilizarea cântarului:

1. Puneți cântarul pe o suprafață plană și tare și apăsați butonul „ON / OFF” pentru a-l porni. Pentru o secundă va afișa pe display toate elementele apoi va apărea „0,000kg”.
2. Apăsați butonul „UNIT” atunci când pe ecran apare „0,000kg” pentru a seta scala dorită „kg”, „oz”, „lb”, „g”.
3. Funcția "TARA" vă permite să eliminați greutatea accesoriilor, cum ar fi prosoape etc., pentru a preveni înregistrarea unei valori false atunci când cântăriți copilul în acest mod. Mai întâi ar trebui să cântăriți aceste obiecte și apoi să apăsați butonul "TARA". Pe afișaj va apărea cuvântul „TARA” și va fi cântărit doar ceea ce este pus pe cântar de atunci înainte.

Manual de utilizare EL203A

4. În cazul în care copilul se mișcă în timpul cântării, puteți utiliza funcția „HOLD”. Porniți cântarul și așezați copilul în poziție. Veți observa că citirea de pe afișaj variază ușor atunci când copilul se mișcă. Apăsați butonul „HOLD” și pe ecran apare cuvântul „HOLD”. Atâta timp cât cuvântul „HOLD” nu clipește, cântarul va citi corect greutatea copilului. Cântarul se va opri automat după cinci minute; puteți apăsa din nou „HOLD” pentru a-l debloca.

5. Apăsați butonul „ON / OFF” pentru a opri cântarul după cântărire.

Punerea în funcțiune:

Când cântăriți, vă rugăm să puneți copilul în centrul cântarului. Greutatea va crește continuu până când greutatea este stabilă și neschimbată și se afișează „HOLD”, atunci datele afișate reprezintă greutatea corectă.

Notă: Dacă așezați un obiect sau bebelușul pe cântar înainte de a apăsa butonul ON/OFF, citirea va fi „0,000kg” (datorită faptului că acest cântar efectuează o tarare automată atunci când este pornit). Ridicați obiectul și apăsați butonul „TARA” pentru a aduce cântarul la valoarea „0,000”.

Când nu există nicio greutate pe cântar timp de 60 de secunde, acesta se va opri automat.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Indicator de supraîncărcare, pe display va fi afișat „EEEE”;
2. Indicator de baterie descărcată, pe display va fi afișat „Lo”;
3. Produsul este destinat uzului casnic și nu poate fi utilizat în scop comercial;
4. Feriți produsul de apă, surse de foc sau substanțe corozive ori inflamabile;
5. Vă rugăm să vă asigurați că nu sunt depozitate alte obiecte pe cântar atunci când nu este utilizat. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile;
6. Nu puneți copilul pe marginea cântarului, pentru a evita pericolul unei accidentări;
7. Vă rugăm să nu puneți greutate în afara cântarului, pentru a nu deteriora senzorii.